


Helppo yhdistelmä SDR:n kanssa

Käytä Palodent® Plus sektorimatriisijärjestelmää yhdessä SDR:n kanssa! Se on nopea ja helppo tapa saada hyvä saumatiivys, tarkka kontakti ja kestävä täyte!

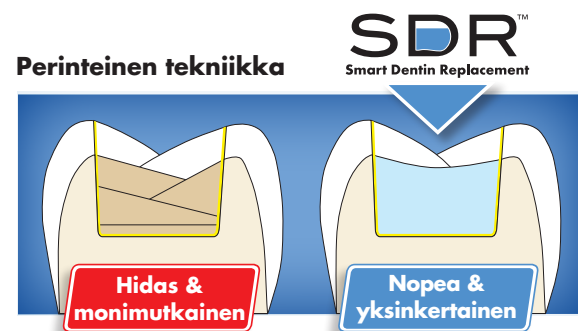

- 4mm:n erät ilman kerrostamista
- Juokseva konsistenssi –erinomainen kaviteettiin mukautuminen
- Yhteensopiva kaikkien sidosaineiden kanssa*

*Yhteensopiva kaikkien metakrylaattipohjaisten sidosaineiden ja yhdistelmämuovien kanssa

Tilaustiedot

659700 Introductory Kit
100 matriisia-25 kpl jokaista kokoa:
3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm
75 kiilaa – 25 kpl jokaista kokoa: small, medium, large
30 WedgeGuardia -10 kpl jokaista kokoa: small, mediun
1 yleisrengas, 1 kapea rengas, 1 renkaanasetuspihdi, 1



625.00.001 Starter Kit
20 matriisia – 15 x 5.5mm, 5x4.5mm
15 kiilaa – 5 jokaista kokoa: small, medium, large
5 WedgeGuardia – medium
2 x yleisrengas, 1 renkaanasetuspihti, 1 pinsetti
1 SDR näyte: 4 Compula® annostelukärkeä (à 0,25g)



Matriisi refill	Matriisi, refill EZ Coat
659710 Koko 3.5 mm (50 kpl)	659610 Koko 3.5 mm (50 kpl)
659720 Koko 4.5 mm (50 kpl)	659620 Koko 4.5 mm (50 kpl)
659730 Koko 5.5 mm (50 kpl)	659630 Koko 5.5 mm (50 kpl)
659740 Koko 5.5 mm (100 kpl)	659640 Koko 5.5 mm (90 kpl)
659750 Koko 6.5 mm (50 kpl)	659650 Koko 6.5 mm (50 kpl)
659860 Koko 7.5 mm (50 kpl)	659660 Koko 7.5 mm (50 kpl)

Rengas refill
659760 Yleisrengas (2 kpl)
659770 Kapea rengas (2 kpl)

Kiila refill
659780 Small (100 kpl)
659790 Medium (100 kpl)
659800 Large (100 kpl)

WedgeGuard, refill
659830 Small (50 kpl)
659840 Medium (50 kpl)
659850 Large (50 kpl)

Renkaanasetuspihti (1 kpl)
659810
Pinsetit (1 kpl)
659820

DENTSPLY Nordic Baltic
Box 2024, Flygfällsgatan 12
SE-128 21 Skarpnäck
Fax +46 (0) 8 447 60 55
www.dentsply.se

Paikalliset yhteystiedot, katso:
www.dentsply.se
www.dentsply.no
www.dentsply.dk
www.dentsply.fi

606.03.002 SDR™ Refill
15 Compula® annostelukärkeä
(à 0,25g), universaali sävy



606.03.003 SDR™ Eco Refill
50 Compula® annostelukärkeä
(à 0,25g), universaali sävy
1 SDR säilytysrasia



TYPER & Original/EO Grafika 1312

TÄYDELLISET KONTAKTIT



For better dentistry

DENTSPLY

For better dentistry

DENTSPLY

Sektorimatriisit II-luokan täytteisiin

- ✓ Aina hyvät kontaktit
- ✓ Hyvä saumatiiviys
- ✓ Vähemmän ylimääriä, vähemmän viimeisteltävää
- ✓ Helppokäyttöinen järjestelmä

Muotoiltu marginaalireuna täyteen anatomisen muodon saavuttamiseksi

Suoja gingivaaliksiaalikulmassa estää vajaa/ylitötön



Palodent Plus EZ pinnoitteella

Erittäin ohut, tarttumaton pinnoite uskomattoman helppoon matriisinauhan poistoon. Värikoodattu kokojen erottamiseksi toisistaan.



Parempi muotoilu: matriisi myötäilee hammasta

Rengas nikkelititaania, joustaa ja kestää, voidaan autoklavoida jopa 1000 kertaa

Liiska helpottaa matriisin asettamista ja poistamista

Lasikuituvahvistetut V-muotoillut muovikannat pitävät kiilan paikallaan

Reiät pinsetille helpottavat kiilan asettamista ja poistamista

MOD



Parodontaalinen tapaus



Puuttuva kuspi



SUOJAAVAT WEDGE GUARDIT

- + Suojaa naapurihammasta preparoinnin aikana
- + Helpottaa ja nopeuttaa kaviteetin preparointia
- + Suoja poistetaan preparoinnin jälkeen, kiila jää paikalleen




ANATOMISESTI MUOTOILLUT KIILAT

- + Muotoillut kiilat on helppo asettaa paikalleen tiiviisti
- + Uurre kiilan alapuolella helpottaa vastakkaiselle puolelle asetettavan kiilan laittamista



LIUSKALLISET MATRIISIT

- + 3.5 mm: lapsille ja pieniin premolaari kaviteetteihin
- + 4.5 mm: keskikokoisiin kaviteetteihin
- + 5.5 mm: yleisin koko molaareihin II-luokan kaviteeteissa
- + 6.5 mm: syvät ja laajat kaviteetit, kuspikorjaukset molaareissa
- + 7.5 mm: syvät ja laajat kaviteetit, kuspikorjaukset molaareissa

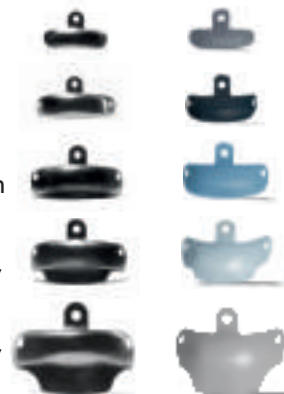

RENKAANASETUSPIHDIT

- + Lukko ja taivutetut kärjet kiinnittävät renkaan turvallisesti
- + Uurteet renkaan uudelleenmuotoiluun



ERIKOISPINSETIT

- + Pinseteissä on erikoiskärki jolla saa hyvän otteen matriisista/kiilasta
- + Automaattisesti suljetut pinsetit: ei riskiä tiputtaa matriisia/kiilaa
- + Pinsetin kärjessä valettu piikki



VAHVAT NI-TI RENKAAT

- + Yleisrenkas molaareille (vaaleansininen)
- + Kapea rengas premolaareille (tummansininen)

