

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal
muovisementti

Tervetuloa yksinkertaisuus



Vain kaksi tuotetta riittää.

3M™ RelyX™ Universal -muovisementtiä voi käyttää joko itsekiinnittyvänä sementtinä tai sidostettavana sementtinä yhdessä **3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosaineen kanssa.**

Tämä tuoteyhdistelmä tekee lukemattomat erilaiset muovisementit, esikäsitteilyaineet ja sidosaineet kerralla tarpeettomiksi. **Suorien ja epäsuorien restauraatioiden sidostaminen käy jatkossa helposti ja vaivattomasti.** Kun säilytettäviä ja täydennettäviä tuotteita on vähemmän, säästät tilaa, rahaa ja aikaa.

Tehokkuus on yksinkertaista.

- **Kaksi tuotetta, joilla saa kiinnitettyä käytännössä kaikki suorat ja epäsuorat sidostusindikaatiot**
- **Tehokkaasti itsekiinnittyvä RelyX Universal -muovisementti**
- **Scotchbond Universal Plus -sidosaine parantaa sidoslujuuksia kaikille materiaaleille**
- **Uusi 3M automix-ruisku**
- **Ylimäärät on helppo poistaa**
- **Esteettiset lopputulokset**

Käänteentekevä uusi ruisku.

3M:n uusi automix-ruisku parantaa käyttömukavuutta. Se on kehitetty annostelun, puhdistamisen ja säilyttämisen helppoutta silmällä pitäen. Pienikokoisesta, vähän jätettä tuottavasta 3,4g:n ruiskusta riittää noin 15 käyttökertaan.

Ylimäärät on helppo poistaa.

Tehokas viimeistä työvaihetta myöten. Ainutlaatuinen kemiallinen koostumus takaa, että ylimäärät eivät lähde valumaan hiontarajalla, ja että ne on helppo poistaa lyhyen valokovetuksen jälkeen.



Fluoresoivasta 3M™ Lava™ Esthetic-zirkoniasta valmistettu siita, joka on sementoitu itsekiinnittyvästi RelyX Universal -muovisementillä.* Kuva: Jan Gueth, hammaslääkäri, Saksa

Vähemmän tuotteita varastossa, enemmän säästöä

95%

hammaslääkäreistä oli sitä mieltä, että RelyX Universal -muovisementin yleiskäyttöisyys auttoi **pienentämään varastomääriä ja säästämään kustannuksissa.**

Helpottaa hoitohenkilökunnan työtä

97%

hammaslääkäreistä oli sitä mieltä, että henkilöstön on helpompaa käyttää **yhtä yleiskäyttöistä muovisementtiä kuin useita erilaisia.**

*käyttökertaa kohti, verrattuna tavanomaisiin nykyisiin saatavilla oleviin automix-järjestelmiin **verrattuna nykyisiin käytössä oleviin automix-ruiskuihin

***Lähde: 3M:n EU-alueella ja Yhdysvalloissa toteuttama kenttätutkimus

“Erittäin hygieeninen annostelujärjestelmä tuottaa vain vähän jätettä.”

M.W., Iso-Britannia***

80 %

vähemmän sementtihävikkiä* uudella sekoituskärjellä.


Hygieenisempi ruisku.**
Itsesulkeutuva, säilytetään ilman sekoituskärkeä.

Pitkä ja ohut jatkokanyyli helpottaa annostelua juurikanavaan



Erinomaiset sidokset itsekiinnitteisenä tehostavat työskentelyä.

RelyX Universal -muovisementti sitoutuu itsekiinnitteisesti käytettynä erittäin lujasti dentiiniin, joten se on luotettava valinta useimpiin käyttöindikaatioihin, eikä yleensä vaadi erillisen sidosaineen tai esikäsitteilyaineen käyttöä. Sekä valo- että kemialliskovetteiseen käyttöön.

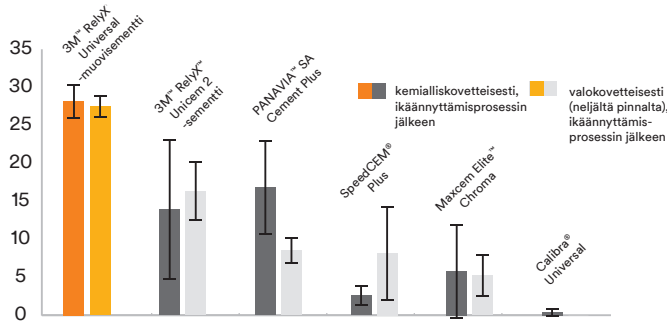

Dentiinisidoksen repäisylujuus (MPa) keinokehoisen ikäännyttämisprosessin jälkeen
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, No 3629, 2019

“Helppo käsiteltävyys ja vähän komponentteja, joten virhemahdollisuuksia on vähemmän.”

J.L., Saksa***

Entistä ergonomisempi muotoilu, ja


50 %

vähemmän muovijätettä*

Erinomainen valinta sidostustoimenpiteisiin.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosaine on ensimmäinen röntgenopaakki universaali sidosaine, joka sopii kaikkeen suoraan ja epäsuoraan sidostamiseen. Se on osa täysin optimoitua järjestelmää: sementti kovettaa sidosainekerroksen, eikä valokovetusta tarvita.

Scotchbond Universal Plus -sidosaine soveltuu esikäsitteilyaineeksi kaikille materiaaleille, lasikeraamiset materiaalit mukaan lukien. Lisäksi se parantaa itsekiinnittyvän sementin ennestäänkin hyvää sitoutumista esim. zirkoniaan.

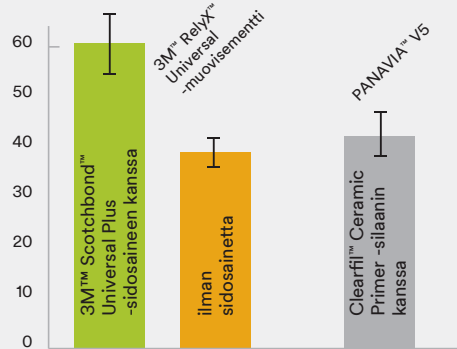

Repäisylujuus (MPa) zirkoniaan kemialliskovetteisesti.
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol 99A, No 1838, 2020




Erittäin pieni jälkisensitiivisyysriski

99%

hammaslääkäreistä kertoi, että RelyX Universal -muovisementti ei aiheuta käytännössä katsoen lainkaan jälkisensitiivisyyttä.***

Luonnollista estetiikkaa neljällä fluoresoivalla värisävyllä, jotka eivät värjäynty.

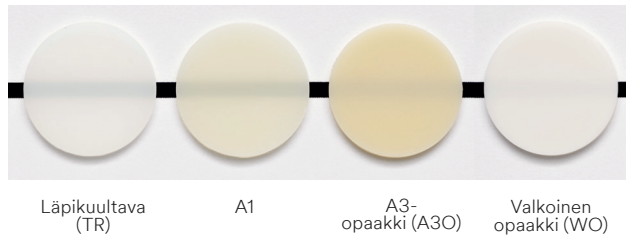

Läpikuultava (TR)

A1

A3-opaakki (A3O)

Valkoinen opaakki (WO)

Tilaustiedot

3M™ RelyX™ Universal -muovisementti

Tuoteno. Tuotetiedot

Aloituspakkaus

56968 4 kpl 3M™ RelyX™ Universal -muovisementtiruisuja, sävyt TR, A1, A3O, WO (3,4 g per ruisku), 60 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, 20 jatkokanyyliä, 1 pullo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosainetta (5 ml), 1 ruisku 3M™ Scotchbond™ Universal -etsausainetta (3 ml), 25 sinistä etsausruiskun kärkeä, 50 oranssia mikroharjaa, kuvalliset käyttöohjekortit

Kokeilupakkaukset

Jokainen kokeilupakkaus sisältää: 1 kpl 3M™ RelyX™ Universal -muovisementtiruisu (3,4 g), 15 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, 5 jatkokanyyliä, 1 pullo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosainetta (1,5 ml), 1 ruisku 3M™ Scotchbond™ Universal -etsausainetta (3 ml), 25 sinistä etsausruiskun kärkeä, 50 oranssia mikroharjaa, kuvalliset käyttöohjekortit

56969 Sävy TR

56970 Sävy A1

Refillit

Jokainen refilli sisältää: 1 kpl 3M™ RelyX™ Universal -muovisementtiruisu (3,4 g), 15 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, 5 jatkokanyyliä

56971 Sävy TR

56973 Sävy A3O

56972 Sävy A1

56974 Sävy WO

Säästöpakkaukset

Jokainen säästöpakkaus sisältää: 3 kpl 3M™ RelyX™ Universal -muovisementtiruisuja (3,4 g per ruisku), 45 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, 15 jatkokanyyliä

56977 Sävy TR

56978 Sävy A1

Sekoituskärjet

56975 30 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä

56976 15 kpl 3M™ RelyX™ Universal pieniä sekoituskärkiä, mukana jatkokanyyliit

3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosaine

Pullo

41293 **Aloituspakkaus:** 1 kpl 3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosainepullo (5 ml), 50 kertakäyttöistä mikroharjaa, 1 ruisku 3M™ Scotchbond™ Universal -etsausainetta (3 ml), 25 annostelukärkeä

Refilli: 3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosainepullo (5 ml)

41294 1 kpl 5 ml:n pullo

41295

3 kpl 5 ml:n pulloja

Yksittäispakkaus

3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosaine L-Pop-yksittäispakkausissa, 1 ruisku 3M™ Scotchbond™ Universal -etsausainetta (3 ml), 25 annostelukärkeä

41297 **Aloituspakkaus: 50 L-Pop-yksittäispakkausta**

41299

200 L-Pop-yksittäispakkausta

41298 100 L-Pop-yksittäispakkausta

41304

400 L-Pop-yksittäispakkausta

3M™ Scotchbond™ Universal -etsausgeeli

41263 2 ruiskua 3M™ Scotchbond™ Universal -etsausainetta (3 ml per ruisku), 50 annostelukärkeä



3M™ RelyX™ Universal -muovisementti, aloituspakkaus (56968)



3M™ RelyX™ Universal -muovisementti, kokeilupakkaus, TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal -muovisementti, refilli, TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosaine, refilli (41294)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosaine, yksittäispakkaus, 100 L-Pop-yksittäispakkausta (41298)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus -sidosaine yksittäispakkausessa

Helpottaa hygienian ylläpitämistä. Vähentää ristikontaminaation vaaraa.



Suomen 3M Oy
3M Oral Care
PL 600
02150 ESPOO
Puh. (09) 52 521
3MOralCare.fi@mmm.com

3M.fi/dental

3M, Lava, RelyX ja Scotchbond ovat 3M Companyn tai 3M Deutschland GmbH:n tavaramerkkejä. Käyttö luvalla Kanadassa. Kaikki muut tavaramerkit ovat muiden yritysten omaisuutta. © 3M 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. 18514387_FI20201029